



F-808

EXFOLIACIÓN FACIAL
SKIN EXFOLIATOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

• Debe colocarse sobre un carrito de belleza.

• Tiene que ser usado en una zona donde el cable de la sonda sea accesible (en 0,5m).

DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.




La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE



• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	SONDA DE EXFOLIACIÓN	10018	1
2	PROTECTOR	-	1
3	PULSERA	10019	1
4	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
5	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1

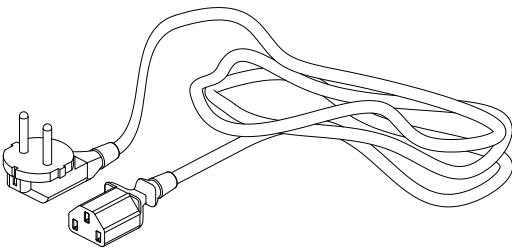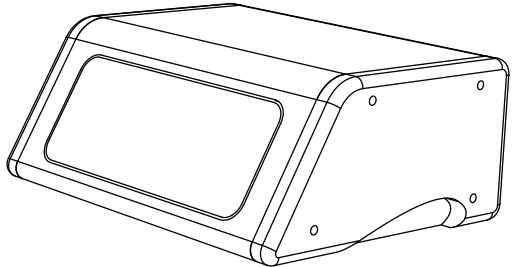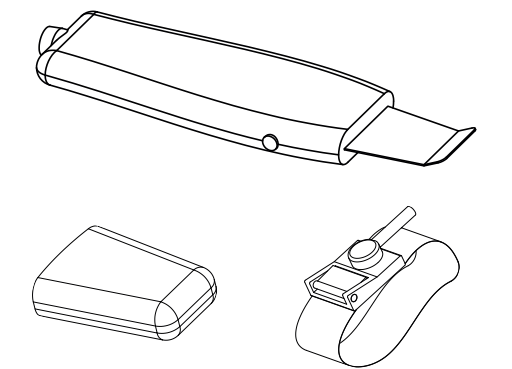

PANEL FRONTAL/PANEL
TRASERO

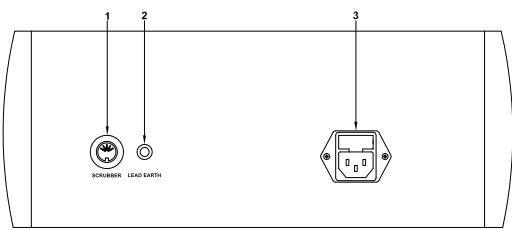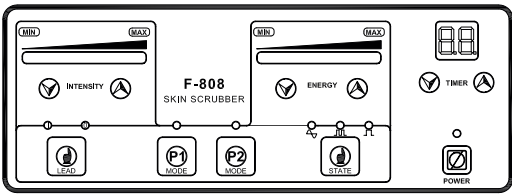

1. Sonda de exfoliación

2. Pulsera

3. Cable de alimentación eléctrica

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como “POWER LINE INPUT”.

2. Conecte los accesorios correctamente en el panel delantero/trasero como se indica en el esquema.

3. Encienda el botón “POWER”.

USO GALVÁNICO

1. Aplique el producto correctamente polarizado en la zona de piel a tratar.

2. Pulse el botón “P1 MODE” para activar la función galvánica.

3. Seleccione la polaridad de la corriente requerida pulsando la tecla “LEAD” para cambiar entre “+” (indicado por la LED “I”) o “-” (indicado por la LED “O”),

Polo positivo (I)	Polo negativo (O)
Soluciones con pH ácido	Soluciones con pH alcalino

4. El uso de la pulsera ha sido sustituido por los dos pasadores de tierra en el mango exfoliante de la piel, por lo que el brazalete se debe desconectar. Una vez que coloque los dedos (índice y pulgar), en cada uno de los pasadores de de tierra, se creará, un circuito de seguridad y la corriente galvánica fluyan hacia la sonda. Si suelta sus dedos, la corriente cesará al cabo de 3 • 5 segundos por motivos de seguridad.

5. Ajuste la intensidad mediante “INTENSITY” al nivel deseado.

6. Utilice la sonda sobre la piel.

USO DE PEELING
ULTRASONIDOS

1. Coloque el brazalete en la muñeca del cliente.

2. Aplique el producto conductor apropiado generosamente en la superficie de la piel.

3. Pulse el botón “P2 MODE” para activar la función de peeling.

4. Seleccione el tipo deseado de onda (continua, pulsada o combinada), pulsando el botón “STATE”.

5. Ajuste el botón “ENERGY” de salida al nivel deseado

6. Utilice la sonda sobre la piel.

USO COMBINADO GALVÁNICO
Y POR ULTRASONIDOS

1. Coloque el brazalete en la muñeca del cliente.

2. Aplique gel conductor para el área de tratamiento

3. Pulse los botones “P1 MODE” y “P2 MODE” para activar la función combinada.

4. Seleccione el tipo deseado de onda (continua, pulsada o combinada), pulsando el botón “STATE”.

5. Ajuste tanto la “intensidad” y “ENERGY”. a los niveles de producción deseados. Utilice la sonda sobre la piel.

NOTAS

• Un sistema de control positivo de tierra está en marcha mientras la máquina está en funcionamiento. Esto significa que si la máquina no puede encontrar un retorno a tierra, el sistema cortará la corriente de salida a la sonda. Sin embargo, una vez que la sonda vuelva a entrar en contacto con el cliente (y encuentre circuito de tierra), el sistema reiniciará la corriente inmediatamente. Esta es un mecanismo de seguridad y no debe confundirse con un fallo del sistema.

• La sonda no vibrará mientras se utilice el programa “P1”.

PRECAUCIÓN

• Las personas que padezcan enfermedades coronarias, infecciosas, hipersensibilidad o que tengan algún implante metálico no deberán someterse a este tratamiento.

• No mantenga la sonda en la misma posición durante demasiado tiempo para evitar posibles quemaduras.

• Manipule la sonda con mucho cuidado ya que contiene componentes delicados. Preste especial atención con la hoja de la sonda ya que cualquier daño podría provocar heridas en la piel.

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	39x36x18,5
	Peso bruto (Kg)	4,3
	Tamaño consola (cm)	33x17/24x13
Características de trabajo	Potencia de trabajo	6 W
	Frecuencia de trabajo	25 • 27 KHz
	Tiempo de trabajo preestab- lecido	15 min
Caracterisicas electricas	Voltage nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nomial	29 W

FAQ

La sonda de repente deja de emitir:

• Si la sonda se separa de la piel, dejará de emitir después de 5 segundos. Este es un mecanismo de seguridad y no debe ser confundido con un fallo del sistema.

• Toque de la piel con la sonda y volverá a emitir de nuevo después de 5 segundos.

MAINTENIMIENTO

• Cualquier aceite en la sonda debe retirarse inmediatamente.

• Después de su uso, limpie la sonda y guárdela en su funda para mantenerla protegida en todo momento.

• Guarde la sonda con cuidado para evitar dañarla.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
10018	SONDA DE EXFOLIACIÓN